

医療・健康

独自技術で湿気を水に変える除湿乾燥システム



製品・技術の
名称

PROSPER (プロスパー) ASK-750S

概要

独自の除湿乾燥システムを内蔵したコンパクトタイプ

- 3段の棚網板にプラスチックのバスケットが付きま
- 乾燥器材を下段保管棚から上段棚へと、ローテーション。
- チューブ用カートリッジに送気用チューブを接続し、麻酔用バッグに挿入してバッグ内を乾燥出来ます。
- 小物用フックが棚横に3ヶあります。
- ロングチューブはクロスパイプにかけ曲折し、先端の水たまりを防ぎます。

ここが
ポイント！

プロスパー低温除湿乾燥は、ヒーター上限40°Cまで！
熱に弱いゴム類、樹脂系製品の素材変化、劣化がありません。
除湿されたエアにuv型紫外線殺菌灯を照射し、クリーンなエアが庫内背面及び、上部ノズルより吹き出します。

参考価格：※お客様の要望に応じて対応させていただくため要相談

企業PROFILE



株式会社スミレ工作所

代表取締役：萩原 高明
大阪府寝屋川市仁和寺本町2-1-8
Tel：072-838-3656 / Fax：072-838-3658
<https://www.kk-sumire.com/>

ASK-750S	
本体外寸法	700W×4500×1880H m/m
庫内有効寸法	620W×420D×1700(960)H m/m
カートリッジ数	蛇管用 1個×10本 チューブ用 1個×15本
バッグノズル	フック 3ヶ
マスク用フック	フック 3ヶ
バスケット	ポリ製 3ヶ
乾燥方式	低温除湿乾燥方式
庫内エア	—
ヒーター容量	400W
除湿乾燥工程	庫内温度40°C工程ダイヤル設定
加湿乾燥	—
電源	AC100V20A
形状寸法図	

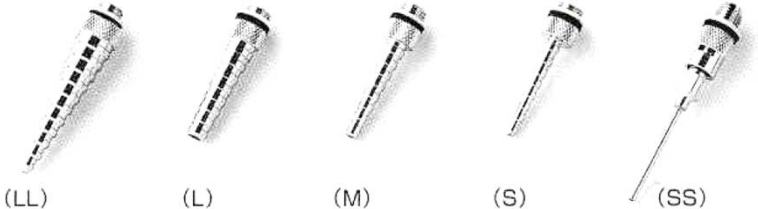

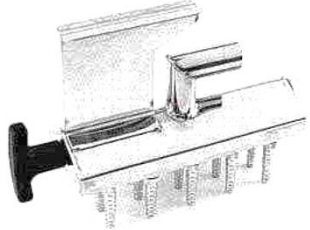

企業からの一言

●導入いただいた企業様からは、特に「ヒーター上限が40°Cまでという低温除湿でゴム類、樹脂系製品の劣化防止」に高い評価をいただいています。

■販売企業

株式会社アスカメディカル
〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号
TEL: (06)6939-3011(代)

PROSPER オプション

オプション名		
<p>●ノズル</p> <p>用途に応じて取替え可能です。</p>	 <p>(LL) (L) (M) (S) (SS)</p>	
<p>●カートリッジ</p> <p>簡単に脱着できる蛇管用と、チューブ用の2タイプで、用途に応じてご使用できます。</p>	 <p>蛇管用</p>	 <p>チューブ用</p>
<p>●バスケット</p>	 <p>1200V用ステンレス製バスケット</p> <p>900V用ステンレス製バスケット</p> <p>750S用ポリ製バスケット</p>	

企業PROFILE



株式会社スミレ工作所

代表取締役：萩原 高明
 大阪府寝屋川市仁和寺本町2-1-8
 Tel：072-838-3656 / Fax：072-838-3658
<https://www.kk-sumire.com/>

■販売企業

株式会社アスカメディカル
 〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号
 TEL: (06)6939-3011(代)